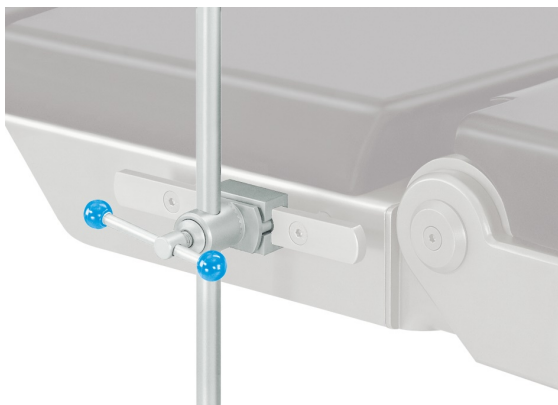




Radialstellkloben von 16mm- 18mm Ø

Regulärer Preis:

230,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar

Produktinformationen "Radialstellkloben von 16mm- 18mm Ø"

FAWS-17.6 Radialkloben für OP-Tisch

- für runde und eckige Stangen,
- passend für die Zubehörschiene an OP Tischen und Behandlungsliegen.
- Vertikal drehbar mit Rastung.
- Der Kloben wird aufgeschoben auf die Schiene, die Feststellschraube blockiert sowohl auf der Schiene als auch die Stangenaufnahme. (Einhandbedienung, der Kloben blockiert sich selbst bei Feststellung)
- Es ist möglich den Kloben stationär mit einer optionalen Befestigungsschraube zu blockieren (bitte separat bestellen)
- Aus hochwertigem massivem Edelstahl, Oberfläche mattiert.
- Ein Kloben für runde und eckige Stangen
- Montage an seitlicher Schiene nach EU-Standard (25 x 10 mm).
- **Zur Aufnahme von Zubehör mit runder Führung von 16mm Ø bis 18mm Ø**
- **Zur Aufnahme von Zubehör mit rechteckiger Führung von 16mm X 16 mm**
- Der Abstand von Mitte Stange zu Mitte Schiene beträgt ca. 40mm

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-17.6
Veröffentlicht:	2026-09-22
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

