



Operationstisch C-200 elektrisch verstellbar

8.350,00 €*
* inkl. MwSt.

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage

Produktinformationen "Operationstisch C-200 elektrisch verstellbar"

OP-Tisch elektromotorisch verstellbar.

Komplett ausgestattet **inkl. Kopflagerung und 2-fachen Beinplatten**. Die elektromotorischen Verstellungen der Höhe, Rückenlehne, Trendelenburg, Antitrendelenburg seitlicher Kippung, Flex und Reflex werden mit einer Fernbedienung durchgeführt. Die manuellen Verstellungen der Beinplatten, Kopfplatte und Nierenbrücke erfolgen an den jeweiligen Bauteilen.

Durch die O- Positionstaste (Level) auf der Fernbedienung werden alle elektrischen Verstellungen der Lagerfläche schnell und sicher wieder in horizontale Lage gebracht.

Der Operationstisch C-200 kann ohne störende Netzkabel im Batteriebetrieb betrieben werden. Die Struktur ist aus hochwertigem Edelstahl (Werkstoff 1.4301) und antibakteriell, leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Die Komplettlieferrung des OP-Tisches erfolgt mit abnehmbaren, für den Patienten komfortablen Polstern. An diesem Operationstisch sind die Beinplatten und das Kopfteil abnehmbar. Die zentrale Bremse blockiert alle vier Räder an dem OP-Tisch. Die Doppelaufrollen haben einen Durchmesser von 125mm, dadurch ist das Schieben auch unter Last leicht möglich. Die Liegefläche ist röntgenfähig und mit einer Kassettenhalterung versehen. Die Polsterauflagen mit Memoryeffekt sind flüssigkeitsdicht und antistatisch.

Die beidseitigen Normschienen (10 x 25 mm) bestehen aus massivem Edelstahl, MPG Klasse 1, ES 93/42/EEC, MDD

Technische Daten OP-Tisch C-200

- Länge mit Kopfplatte: 2090mm
- Breite der Tischplatte mit Seitenschienen: 570mm
- Sanfte ruckfreie Höhenverstellung: 700mm – 1000 mm (Uk Polster)
- Polsterauflage: B525mm X H60mm
- Trendelenburg/ Anti-Trendelenburg: 30° / 30°
- Kantung rechts / links: +/-20°
- Flex, Reflex
- Rückenplattenverstellung: +75 / -20°
- Kopfplattenverstellung: +45° / - 50°
- Beinplattenverstellung: -90° / Spreizung 180°
- Röntgenfähige Lagerfläche

Email: info@thm-medizintechnik.de

Telefon: +49 451 4994256

- 0-Positionstaste (Leveltaste)
- Belastung max.: 180 kg
- Elektroanschluss 230/227/110/100V 50HZ 250VA
- Gewicht: ca. 220 Kg
- Integrierter Akku, Leistung bis zu 80 OPs

Im Preis enthalten sind:

- OP-Tisch komplett mit:
- Kopfplatte, Rückenplatte, Körperbrücke, Sitzplatte, geteilte Beinplatten spreizbar- und abnehmbar
- alle Polsterauflagen dazu
- Akkubetrieb
- Ladekabel
- Kabelfernbedienung für alle elektrischen Verstellungen mit **0-Positions-Taste**
- Versand per Spedition deutsches Festland

Optional dazu lieferbar mit Aufpreis sind z. B.:

- [Vielfaches Lagerungszubehör](#)
- [Spezielle Kopflagerung für Ophthalmologie, Dermatologie, MKG und Haartransplantationen](#)
- [Spezielle Schulter- Rückenplatte für die Schulterarthroskopie in Beach- Chair- Position](#)
- Patientensicherungen
- Qualifizierte Direktlieferung bis zum Verwendungsort und Einweisung nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 MPBetreibV (Versandoption)
- u.v.m.


Versandoptionen

Standard (im Preis enthalten): Lieferung frei Kante oder frei Hof abgeladen bei freier Zufahrt für LKW. Räumlich Nähe für eine Entlademöglichkeit für Lieferfahrzeug (LKW) muss vorhanden sein!

Qualifizierte Direktlieferung Lieferung (QDR, optional wählbar im Warenkorb): Lieferung bis an den Verwendungsort bei freier Zufahrt und barrierefreiem Zugang, Auspacken der Ware, sowie Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 MPBetreibV mit Einweisungsprotokoll. Inklusive Entsorgung der Verpackung. Preise gelten bei einer Anfahrt für eine Person und Erledigung der Arbeitsschritte in einem Zuge. Räumlich Nähe für eine Entlademöglichkeit für Lieferfahrzeug (LKW) muss vorhanden sein! (Deutsches Festland), Inseln und Hochlagen auf Anfrage.
Bei Abschluss der Bestellung können Sie diese Option auswählen.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	C-200
Gewicht: :	300 kg
Veröffentlicht:	2026-05-05
Lieferung :	Wir liefern auf Wunsch an den Verwendungsort mit Aufstellung und Einweisung nach Protokoll (QDR)
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung



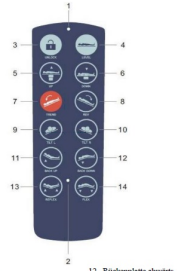

1. Leuchte "Ein"
2. Leuchte-Tasterbelätigung
3. Tastenregelung
4. 0-Position
5. Heben der Lagerfläche
6. Senken der Lagerfläche
7. Trendelenburg
8. Antitrendelenburg
9. Kartung links
10. Kartung rechts
11. Rückenplatte aufwärts
12. Rückenplatte abwärts
13. Reflex
14. Flex

