

## C- Bogenliege mit Carbonplatte

0,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Produktinformationen "C- Bogenliege mit Carbonplatte"

### C-Bogenliege mit Carbonplatte und Polster.

5 verschiedene Ausführungen,

Strahlenschutz optional

- Polsterauflage weich und komfortabel 1 Stk.,
- Patientensicherungsgurt
- Fernbedienung
- **Es sind fünf Ausführungen und Plattengrößen lieferbar**

#### Features:

- Einsatz mit einer mobilen Röntgeneinheit oder einem C-Bogens für minimalinvasive Eingriffe an Patienten bis zu einem Gewicht von 227 kg.
- Die Tischplatte besteht aus hochwertigem Carbon Laminat und verfügt über einen verschließbaren Gesichtsausschnitt.
- **Dank des sehr niedrigen Fahrwerkes ist auch HWS- Bildgebung möglich**
- Der AL- Gleichwert beträgt: Tischplatte 0,7 AL und Polsterauflage 0,9AL
- Jede Laufrolle ist feststellbar
- Die elektrischen Verstellungen durch Handschalter sind leicht zu bedienen.
- Strahlendurchlässiger Bereich: 142cm x 61cm (LxB) ( 142cm x 68,5cm)
- Tischplatte: 214cm x 61cm (LxB) oder ( 214cm x 68,5cm)
- Stärke der Tischplatte: 4cm
- Gesamtabmessung: 218cm x 66cm oder 218cm x 90cm)
- Rollendurchmesser: 13cm

#### Optionen:

- Plattenbreite: 685mm
- Verstellung: +/- Trendelenburg
- Verstellung: +/- Kantung
- Längsverschiebung Querverschiebung
- **Feste Normschiene auf Säulenhöhe**

Email: [info@thm-medizintechnik.de](mailto:info@thm-medizintechnik.de)  
Telefon: +49 451 4994256

- Abnehmbare Normschienenklemme
- Carbon-Armlagerungen
- Streustrahlenschutz
- Seitengitter
- Fußschalter

**Hersteller :**


THM Medizintechnik

**Produktnummer:**

SO-ST-01

**Freigegeben:**

2026-01-09

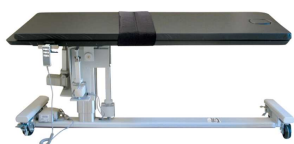

SO-ST1




Höhenverstellung

SO-ST2




Zusätzliche Kantung

SO-ST3

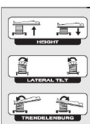

Zusätzlich +/- Trendelenburg

SO-ST4

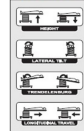

zusätzliche  
Längverschiebung

SO-ST5



zusätzliche  
Querverschiebung

